


PIÈCE DE BRAS TRIM-TO-FIT (AJUSTABLE) TÉLÉCOPIER CE FORMULAIRE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-877-978-9703

Date : _____ Bon de commande : _____ Télécopieur : _____

Nom du patient : _____ Nom et numéro du compte : _____

Mesures des circonférences et des longueurs en centimètres (cm)

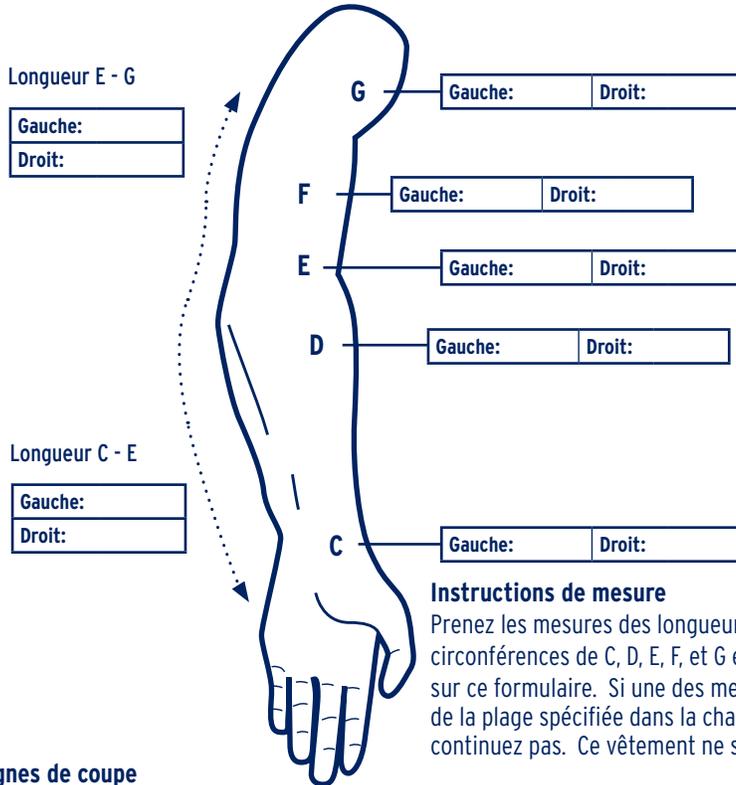

	Moyen	TGrand
Pièce de bras Trim-to-fit		
G Circonférence de l'aisselle	25-44 cm	30-48 cm
F Circonférence partie plus large biceps	25-42 cm	25-45 cm
E Circonférence pli du coude	20-38 cm	25-42 cm
D Circonférence partie plus large avant-bras	20-36 cm	20-40 cm
C Circonférence pli du poignet	15-31 cm	15-35 cm
E-G Longueur du coude à l'aisselle	15-23 cm	20-28 cm
C-E Longueur du poignet au coude	20-25 cm	20-28 cm
Pièce de bras TTF Gauche Qté		
Pièce de bras TTF Droit Qté		
Code de produit*	<input type="text"/>	

Une seule main est nécessaire pour enfiler ou retirer ce vêtement. L'ajustement du vêtement doit être fait par un professionnel formé puis pourra ensuite être appliqué par le patient.

Instructions de mesure

Prenez les mesures des longueurs C-E et E-G, et les circonférences de C, D, E, F, et G et notez les informations sur ce formulaire. Si une des mesures se situe en-dehors de la plage spécifiée dans la charte des mesures, ne continuez pas. Ce vêtement ne sera pas adéquat.

Lignes de coupe

1. Les lignes horizontales sont utilisées pour couper les longueurs et les lignes verticales, pour couper les circonférences.
2. Chaque ligne est clairement identifiée sur le vêtement (par exemple: C-E, F, E-G, etc.)
3. Lorsque vous coupez les lignes horizontales, il faut toujours couper sur une ligne, jamais entre deux lignes.
4. Vous pouvez couper entre deux lignes verticales. Pour exemple, si la circonférence au point C est de 18 cm, le point de coupe se situera entre 15 cm et 20 cm.

Marquage

1. Dessinez une ligne pointillée rouge (ou toute autre couleur qui se démarque) le long des lignes des longueurs C-E et E-G.
2. Dessinez des points à chaque circonférence obtenue. Il devrait y avoir 5 points.
3. Avec une règle, tracez une ligne droite d'un point de circonférence à l'autre jusqu'à ce tous les points soient reliés.

Coupe

1. Coupez les longueurs C-E et E-G le long de la ligne pointillée rouge que vous avez fait précédemment.
2. Coupez la ligne droite qui relie tous les points de circonférence.
3. Pour créer les bandes qui seront utilisées pour tirer et appliquer la compression, coupez chaque ligne horizontale entre 3,5 cm et 4 cm.
4. Soyez prudents - si une bande sera couverte par un Velcro® sur le côté, ne pas la couper.

Velcro®

1. Utilisez 3 des pièces symétriques sur le côté droit. Ils seront placés au poignet, à l'aisselle et juste un peu au-dessus ou en-dessous du pli du coude. (voir fig. 1)
2. Sur le côté opposé, 8 pièces seront utilisées. Une pièce de 2,5 cm pour le bout de C-E, 7,5 cm pour E-G et les autres mesurent 5 cm (voir fig. 1).

Il est contre-indiqué d'utiliser ce vêtement sur des poignets ayant une circonférence de moins de 15 cm ou sur des patients ayant des troubles artériels sévères.

* Afin de réduire le risque d'erreur, seules les commandes ayant un code de produit clairement indiqué seront placées.

Visitez www.jobstcanada.com pour visionner des vidéos de démonstration Trim-To-Fit.

Fig. 1

